


hi-tec

Health and Medical Equipment

ماساژور دستی

مدل HI - HM452



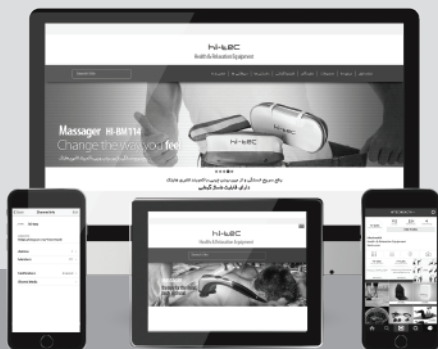

برای همراه بودن با ما و آگاهی بیشتر از:

محصولات جدید ★ جشنواره‌ها 🍷 راهکارهای سلامتی 📦

پیشنهاد می‌کنیم رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت هایتک را دنبال کنید

 www.fareh.com

 [hitec_health](https://t.me/hitec_health)

 [hitec_health](https://www.instagram.com/hitec_health)

 [hitec.Health](https://www.facebook.com/hitec.Health)



فشارسنج
BLOOD PRESSURE MONITOR



تب سنج
THERMOMETER



رطوبت ساز
AIR HUMIDIFIER



بالشت طبی
MEMORY FOAM PILLOW



تشکچه برقی
ELECTRIC HEATING PAD



ماساژور
MASSAGER



ترازوی دیجیتال
DIGITAL BATHROOM SCALE



ترازوی آشپزخانه دیجیتال
DIGITAL KITCHEN SCALE



ردیاب فعالیت
ACTIVITY TRACKER



شیردوش برقی
ELECTRIC BREAST PUMP

hi-tec Products



دستگاه تصفیه هوا
AIR PURIFIER


۲. نمودار نقاط بدن
۳. روش‌های تمیز کردن و نگهداری دستگاه
۴. نکات ایمنی قبل از استفاده
۵. نکات ایمنی مهم
۶. موارد کاربرد
۷. کاربرد
۷. طرز عمل در شرایط اضطراری
۸. نکات مهم استفاده از دستگاه
۹. نام بخش‌های مختلف دستگاه
۱۰. مشخصات دستگاه
۱۰. طرز عمل در شرایط اضطراری
۱۱. مشخصات
۱۲. ضمانت تعمیر
۱۲. گواهی پذیرش

نمودار نقاط بدن

در بدن ما، در ناحیه گردن تا کمر حدود ششصد و پنجاه نقطه مهم و حساس وجود دارد و هر نقطه با تعدادی از اندامها و نقاط بدن ارتباط دارد.

ماساژ سبب بهبود گردش خون، سوخت و ساز و افزایش توان مقابله با بیماری ها میشود.

ماساژ به راحتی میتواند شادی و نشاط عمیقی برایتان به همراه بیاورد.

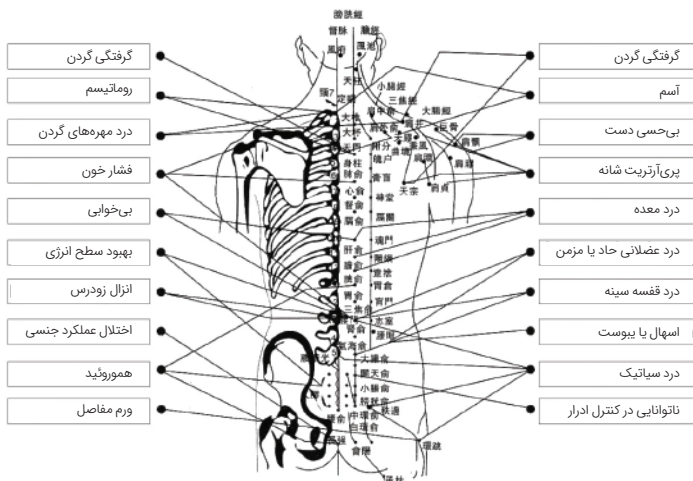

روش‌های تمیز کردن و نگهداری دستگاه

تمیز کردن دستگاه:

- پس از خنک شدن بدنه‌ی دستگاه و قطع اتصال از برق، بدنه دستگاه را با پارچه‌ی خشک تمیز کنید.
- لطفاً دستگاه را در مجاورت آب یا سایر مایعات قرار ندهید.

جمع کردن دستگاه پس از استفاده:

- پس از پایان کار، دوشاخه دستگاه را از برق جدا کنید. لطفاً برای این کار سیم را نکشید و دوشاخه را با دست از پریز خارج کنید. برای جمع‌آوری سیم نیز هرگز آن را در هم نیچید.
- دستگاه را در جای خشک نگهداری کنید.



نکات ایمنی قبل از استفاده

- اگر بیماری خاصی دارید، قبل از استفاده از این دستگاه ماساژور، لطفاً با پزشک خود مشورت کنید.
- لطفاً دستگاه را در حالت روشن و موقع کار کردن به ویژه در حضور کودکان رها نکنید.
- لطفاً دستگاه را در حالت روشن و موقع کار کردن با هیچ‌گونه پوششی نپوشانید.
- لطفاً بیشتر از بیست دقیقه به طور ممتد از دستگاه استفاده نکنید.
- لطفاً دستگاه را در مدت طولانی و به طور ممتد استفاده نکنید، زیرا سطح دستگاه داغ می‌شود.
- برای استفاده مجدد لطفاً صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
- لطفاً این دستگاه را روی سطح پوستی که بیش از حد خشک است، به کار نبرید.
- این دستگاه فقط برای ماساژ غیردرمانی مناسب است. لطفاً از آن برای اهداف درمانی استفاده نکنید.
- لطفاً از این دستگاه قبل از خواب استفاده نکنید. زیرا ممکن است روی کیفیت خواب شما اثر بگذارد.
- لطفاً از این دستگاه در رختخواب استفاده نکنید.
- لطفاً از این دستگاه روی قسمت‌هایی از پوست که زخم است، استفاده نکنید.
- این دستگاه مناسب استفاده کودکان نیست. لطفاً در شرایط استفاده برای کودکان حتماً تحت کنترل بزرگسالان این کار را انجام دهید.



نکات ایمنی مهم

استفاده از این محصول، باید مطابق این دفترچه راهنما باشد.
لطفاً ابتدا و قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را مطالعه کنید تا از خطرات احتمالی آگاه شوید.

- لطفاً پس از استفاده، دستگاه را از برق جدا کنید.
- لطفاً دستگاه را در تماس با آب قرار ندهید.
- لطفاً، این دستگاه را در حمام استفاده نکنید.
- این دستگاه به منظور استفاده خانگی طراحی شده است و برای استفاده تجاری مناسب نیست.

هشدار: برای جلوگیری از حوادثی مانند آتش‌سوزی، جرقه الکتریکی سیم برق و نظایر آن به هنگام استفاده از این دستگاه لطفاً به نکات زیر توجه کنید.

- لطفاً هنگام استفاده از این دستگاه، قطعات دیگری را به آن اضافه نکنید.
- این دستگاه برای کودکان، افراد دارای ناتوانی جسمی- حرکتی و بیماران مناسب نیست.



موارد کاربرد

- اگر دستگاه را طبق دستورالعمل اجرا کنید، می‌توانید از ماساژی آرامش‌بخش لذت ببرید و مطمئن باشید که آسیبی به عضلاتان وارد نخواهد شد.
- برای داشتن یک ماساژ لذت بخش کافی است فقط دستگاه را به عقب و جلو حرکت دهید. برای ماساژ هر ناحیه، ۳ دقیقه زمان مناسبی است. می‌توانید شدت و زمان ماساژ را مطابق میل خود انتخاب کنید تا از هر گونه آسیب احتمالی پیشگیری شود.
- دستگاه دارای دو سری مختلف و جداگانه است. می‌توانید آن‌ها را بر اساس تصویر نصب و استفاده کنید.
- لطفا میزان ارتعاش دستگاه را مطابق میل خود انتخاب کنید.



کاربرد

روش کار:

- لطفا دستگاه را به برق با ولتاژ مناسب وصل کنید.
- برای شروع، دکمه‌ی خاموش/ روشن را فشار دهید.
- برای تنظیم سرعت از دکمه‌های "+" "-" استفاده کنید.
- برای خاموش کردن دستگاه دکمه خاموش/ روشن را فشار دهید.
- برای تعویض سری‌های مختلف ماساژور ابتدا دستگاه را خاموش کنید.



طرز عمل در شرایط اضطراری

- ۱- در صورت بروز هر گونه شرایط غیرعادی به هنگام استفاده، بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
- ۲- اگر قطعات داخلی دستگاه معیوب باشند، می‌توانید ماساژور خود را به مراکز خدمات پس از فروش ما در سراسر جهان ببرید و از خدمات مطمئن و قطعی ما استفاده کنید.
- ۳- اگر سیم برق دستگاه آسیب دید، تعمیرات لازم باید توسط شرکت سازنده یا سرویس‌کاران و نمایندگی‌های مجاز دستگاه انجام شود.


نکات مهم استفاده از دستگاه

- لطفاً این دستگاه را دور از آتش نگه دارید.
- لطفاً به منظور جلوگیری از آتش‌سوزی این دستگاه را بر روی قالیچه یا در رختخواب به مدت طولانی استفاده نکنید.
- لطفاً از این دستگاه در حال خواب استفاده نکنید.
- لطفاً از این دستگاه در نزدیکی چشم‌ها و نقاط حساس بدن استفاده نکنید.
- لطفاً به منظور جلوگیری از آسیب دستگاه، هرگز قطعات آن را باز نکنید.
- لطفاً به هنگام تعویض سَری، دستگاه را خاموش نموده و موارد ایمنی را در نظر بگیرید.
- لطفاً این دستگاه را به هنگام استفاده در مجارت پارچه نرم قرار ندهید.
- لطفاً این دستگاه را در هوای آزاد استفاده نکنید.
- لطفاً پس از استفاده از دستگاه، از قطع کردن اتصال برق اطمینان حاصل کنید.



نام بخش‌های مختلف دستگاه

۱. سیستم کنترل سرعت با ۴ حالت مختلف
۲. سوییچ قطع برق
۳. دسته حلقوی
۴. پایه ماساژور
۵. سه سری ماساژ جداگانه و قابل تعویض

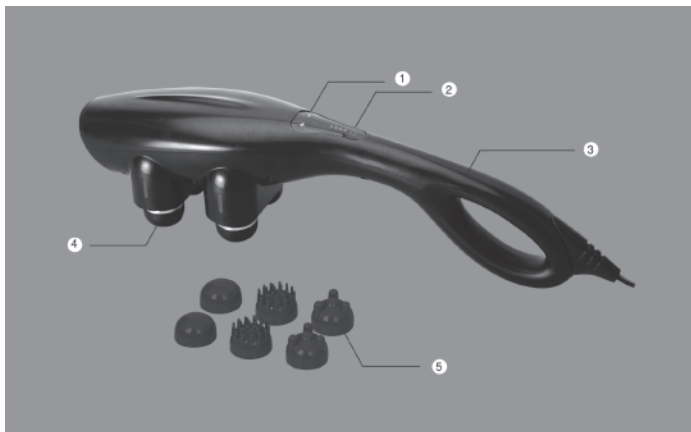

مشخصات دستگاه

- دارای چهار سر با حرکت ارتعاشی و ضربه‌ای ملایم برای بالا بردن کیفیت ماساژ
- دارای پنل کنترل بسیار کارآمد
- دارای سه سری ماساژ جداگانه و قابل تعویض
- دارای دسته‌ی ماساژور حلقوی



طرز عمل در شرایط اضطراری

- در صورت بروز هر گونه شرایط غیرعادی به هنگام استفاده، بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
- اگر قطعات داخلی دستگاه معیوب باشند، می‌توانید ماساژور خود را به مراکز خدمات پس از فروش ما در سراسر جهان ببرید و از خدمات مطمئن و قطعی ما استفاده کنید.
- اگر سیم برق دستگاه آسیب دید، تعمیرات لازم باید توسط شرکت سازنده یا سرویس‌کاران و نمایندگی‌های مجاز دستگاه انجام شود.

مشخصات

ac220V/50Hz	ولتاژ مجاز
28W	نیروی مجاز
1.4Kg	وزن خالص دستگاه
L470*W110*H110 (mm)	ابعاد



Repair Guarantee

ضمانت تعمیر

ضمانت تعمیر			
اسم مشتری:		شماره تلفن:	
آدرس مشتری:			
تاریخ تحویل:		تمبر فروشنده:	
دوره تضمین: یک سال زمان از تاریخ خرید تحت استفاده عادی			

گواهی پذیرش

کنترل نتیجه : _____

کنترل کننده : _____

تاریخ کنترل : _____