

درجه حرارت نرمال چیست ؟

اگرچه حرارت 37°C درجه حرارت نرمال خوانده میشود اما این مقدار در محدوده $36/1^{\circ}\text{C}$ تا $37/2^{\circ}\text{C}$ هم نرمال تلقی میشود. درجه حرارت تحت عواملی مانند فعالیت بدنی، سیگار کشیدن، خوردن و آشامیدن و... قابل تغییر است. همچنین درجه حرارت بدن در صبح هنگام پایین تر از عصر است. دمای اندازه گیری شده زیر زبانی $0/5^{\circ}$ تا $1/0^{\circ}$ درجه سانتیگراد از دمای مقعدی کمتر و $0/5^{\circ}$ تا $1/0^{\circ}$ درجه از دمای اندازه گیری شده زیر بغلی بیشتر است.

مشخصات کلی دستگاه :

- محدوده اندازه گیری : $32^{\circ}\text{C} \sim 42^{\circ}\text{C}$
- پیغام درجه حرارت پایین تر از حد نرمال ($<32^{\circ}\text{C}$): $L^{\circ}\text{C}$
- پیغام درجه حرارت بالاتر از حد نرمال ($>42^{\circ}\text{C}$): $H^{\circ}\text{C}$
- دقت سنجش : $0/1^{\circ}\text{C} \pm 39^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- صدای نمایشگر درجه نرمال : ۱۰۰ صدای بوق طولانی در ۱۰ ثانیه
- صدای نمایشگر تب ($> 37/8^{\circ}\text{C}$) : ۲۰ صدای بوق کوتاه در ۱۰ ثانیه
- زمان خاموش شدن خودکار : 2 ± 8 دقیقه
- نوع باتری : LR4 یا AG3
- طول عمر باتری : ۲ سال یا ۲۵۰۰ بار استفاده از دستگاه
- ابعاد : $10 \times 19 \times 128 \text{ mm}$
- شرایط عملکرد : دمای $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ و رطوبت $30\% \sim 85\%$
- شرایط نگهداری : دمای $10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ و رطوبت $25\% \sim 90\%$

■ ضد آب

نحوه عملکرد :



- ◆ دکمه روشن/خاموش را بفشارید. با شنیدن صدای بوق نمایشگر **1888** را به مدت ۲ ثانیه نمایش میدهد.
- ◆ پس از نمایش $L^{\circ}\text{C}$ دماسنج برای اندازه گیری آماده است.
- ◆ توجه داشته باشید که اگر دمای محیط بیش از 32°C باشد نمایشگر به جای $L^{\circ}\text{C}$ دمای محیط را نمایش میدهد.
- ◆ برای اندازه گیری دمای زیر زبانی دماسنج دیجیتال را زیر زبان قرار دهید. سپس لبها را کاملاً ببندید.
- ◆ دماسنج را تا شنیدن صدای بوق (حدود یک دقیقه) در زیر زبان نگه دارید.
- ◆ به منظور اندازه گیری دمای زیر بغل دماسنج را زیر بغل قرار دهید.
- ◆ ۲-۳ دقیقه صبر کنید. پس از شنیدن صدای بوق دمای اندازه گیری شده را بخوانید.

♦ سپس ۰/۵ واحد به عدد خوانده شده اضافه کنید.
♦ برای اندازه گیری دمای مقعد سر دماسنج را توسط مواد لغزنده ساز چرب کرده و آن را حدود یک سانتی متر وارد مقعد کنید.

♦ تا شنیدن صدای بوق حدود یک دقیقه زمان می برد.
♦ بعد از اندازه گیری ۰/۵ واحد از عدد نمایش داده شده کم کنید.
♦ پس از اندازه گیری دماسنج را با آب سرد و صابون و الکل طبی کاملا تمیز کنید.
♦ با فشردن دکمه روشن/خاموش دستگاه را خاموش کنید، در غیر این صورت پس از حدود ۱۰ دقیقه دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش میشود.

نحوه تعویض باتری:


• هنگامی که علامت “ ” در سمت راست صفحه نمایش داده شد اقدام به تعویض باتری کنید.



• درب محافظ باتری را بردارید.



• زبانه باتری را حدود ۱۸mm بیرون بکشید

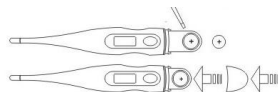

• ابزار مناسبی برای درآوردن باتری انتخاب کرده و باتری را تعویض کنید.

نکات مهم:

- این دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- در حین اندازه گیری درجه حرارت از راه رفتن، دویدن و صحبت کردن بپرهیزید.
- پس از استفاده، آن را در جعبه محافظ قرار دهید.
- آن قرار دادن تب سنج در معرض نور خورشید، گرد و غبار، رطوبت و حرارت زیاد جدا خودداری کنید.

هایتک آمیزه ای از صنعت، دقت، تکنولوژی و هنر

♥ درباره شرکت هایتک

هایتک کانادا با سالها تجربه در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و سلامتی از جمله شرکت های مطرح تولید کننده این محصولات در جهان محسوب می شود و هم اکنون شرکت فاره با شناسایی نیازهای جامعه ایرانی به عنوان نماینده انحصاری هایتک کانادا مفتخر به ارائه محصولات و خدمات پس از فروش در ایران است.

هایتک محصولات خود را با برترین استانداردهای جهانی که شامل طبقه بندی متنوعی از ترازو، ماساژور، فشارسنج، تب سنج، کمربند لاغری، مرطوب کننده هوا، دستگاه بخور، محصولات گرمایی و ... است، با قیمت مناسب و کیفیت برتر به مشتریان عرضه می نماید و به منظور برآورده ساختن تمامی نیازهای مصرف کنندگان، بطور مستمر بر تنوع محصولات خود می افزاید.

ک تمامی محصولات سلامتی و طبی هایتک کانادا تنها با گارانتی معتبر شرکت فاره در ایران ارائه می شود.

ک برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات هایتک به سایت www.hitec-med.ir مراجعه نمایید.