

# hi-tec

Health and Medical Equipment


---

دستگاه ماساژ سر و بدن

---

مدل HI - MS22



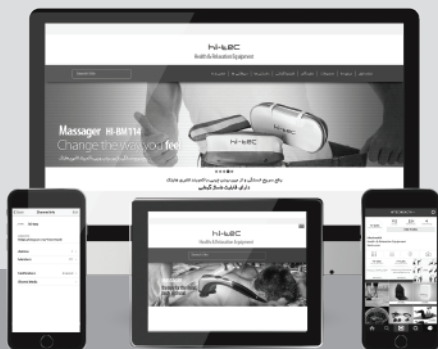

برای همراه بودن با ما و آگاهی بیشتر از:

محصولات جدید ★ جشنواره‌ها 🍷 راهکارهای سلامتی 📦

پیشنهاد می‌کنیم رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت هایتک را دنبال کنید

 [www.fareh.com](http://www.fareh.com)

 [hitec\\_health](https://t.me/hitec_health)

 [hitec\\_health](https://www.instagram.com/hitec_health)

 [hitec.Health](https://www.facebook.com/hitec.Health)



فشارسنج  
BLOOD PRESSURE MONITOR



تب سنج  
THERMOMETER



رطوبت ساز  
AIR HUMIDIFIER



بالشت طبی  
MEMORY FOAM PILLOW



تشکچه برقی  
ELECTRIC HEATING PAD



ماساژور  
MASSAGER



ترازوی دیجیتال  
DIGITAL BATHROOM SCALE



ترازوی آشپزخانه دیجیتال  
DIGITAL KITCHEN SCALE



ردیاب فعالیت  
ACTIVITY TRACKER



شیردوش برقی  
ELECTRIC BREAST PUMP

hi-tec Products



دستگاه تصفیه هوا  
AIR PURIFIER



## مشخصات

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| DC 5V 1.0A          | آداپتور        |
| 100V-240V 50Hz/60Hz | ورودی          |
| 5W                  | درجه قدرت      |
| 3.7V                | درجه ولتاژ     |
| 140*110*110MM       | اندازه‌ی محصول |

## فهرست

۲. مشخصات
۳. ویژگی‌های محصول
۴. ساختار محصول
۵. روش استفاده از محصول
۶. مناسب برای
۶. جزئیات مربوط به شارژ دستگاه
۶. جابجایی
۷. نکته‌هایی برای نگهداری
۸. نکته‌هایی برای رفع نقص

## ساختار محصول

محتویات بسته: دستگاه ماساژور، پایه‌ی شارژر، کابل USB، دفترچه‌ی راهنما.



## ویژگی‌های محصول

۱. دارای باتری لیتیوم بی‌نیاز از تعویض

۲. دارای دکمه کنترل تکی

۳. ده دقیقه: زمانی مناسب برای استفاده از ماساژور

۴. دارای کنترل خودکار نحوه عملکرد دستگاه

۵. دارای دو سرعت متفاوت

۶. دارای دو حالت برای نوازش ملایم

۷. دارای میکرو کابل USB آندروید

۸. DC 5V 1000mAh

۹. ضد آب

۱۰. ماساژ سه جهته سر



## مناسب برای

- ۱- افرادی که برای مدت طولانی از کامپیوتر استفاده می‌کنند.
- ۲- افرادی که برای مدت طولانی در یک موقعیت و حالت باقی می‌مانند.
- ۳- افرادی که از سردرد یا بیماری‌های مربوط به ناحیه سر رنج می‌برند.
- ۴- افرادی که از بی‌خوابی ناشی از تنش‌های عصبی رنج می‌برند.
- ۵- افرادی که از پوست سر چرب و ریزش مو رنج می‌برند.

## جزئیات مربوط به شارژ دستگاه

- ۱- در حال شارژ شدن دستگاه، نشانگر سبز می‌درخشد.
- ۲- وقتی دستگاه به طور کامل شارژ شد، نشانگر سبز می‌شود.
- ۳- مدت زمان شارژ دستگاه حدود دو ساعت است.
- ۴- دستگاه به هنگام شارژ کار نمی‌کند.

## جایابی

این دستگاه دارای ویژگی محافظت در برابر شوک‌های احتمالی و ساده است. می‌توان آن را توسط حمل و نقل هوایی، راه آهن، جاده و حمل و نقل دریایی جابجا کرد.

## شیوهی استفاده از محصول

لطفا در حالت آرامش کامل ماساژ بگیرید. سری مربوط به ماساژ سر را نصب کرده و ناحیهی سر را ماساژ دهید.

۱- با فشار کوتاه دکمه‌ی کنترل می‌توانید دستگاه را روشن کنید.  
با فشار بیش از ۳ ثانیه‌ی دکمه‌ی کنترل می‌توانید دستگاه را خاموش کنید.

۲- با فشار کوتاه دکمه کنترل می‌توانید بین حالت‌های منفی و مثبت تغییر وضعیت ایجاد کنید و دو نوع سرعت تند و کند داشته باشید.

□ آیکن شارژ، با فشار کوتاه دکمه کنترل چراغ LED سبز روشن می‌شود.

± برای تنظیم سرعت، چراغ قرمز می‌شود. با تغییر سرعت، چراغ لحظه‌ای روشن می‌شود.

○ برای تنظیم حالت نوازش ملایم پوست سر، چراغ آبی می‌شود. با تغییر حالت، چراغ لحظه‌ای روشن می‌شود.

## نکته‌هایی برای رفع نقص

قبل از استفاده از این ماساژور، دستورالعمل ایمنی زیر را بخوانید. اگر از هر گونه شرایط پزشکی ذکر شده در زیر رنج می‌برید، قبل از استفاده از این دستگاه ماساژ، با پزشک خود مشورت کنید.

### اگر:

- از بیماری قلبی رنج می‌برید.
- اختلال حسی یا ضربان قلب بالا دارید.
- از پوکی استخوان یا دیابت رنج می‌برید.
- تومور بدخیم دارید.
- اختلال عصبی یا اختلال ادراکی دارید.
- در ناحیه‌ی سر سابقه شکستگی یا جراحی دارید.
- بیماری‌های مربوط به پوست سر یا حساسیت پوستی دارید.
- از بیماری حاد رنج می‌برید یا تحت درمان‌های پزشکی هستید.

| مشکل                                   | دلیل / راه حل                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دستگاه شروع به کار نمیکند              | شارژ دستگاه کم است / لطفاً قبل از استفاده دستگاه را شارژ کنید                                                                    |
| دستگاه ماساژ به صورت غیر عادی خاموش شد | شارژ دستگاه تمام میشود / دستگاه به صورت خودکار ۱۰ دقیقه کار میکند و بعد به صورت خودکار خاموش میشود / دوباره دستگاه را روشن کنید. |
| دستگاه ماساژ صدا میدهد                 | صدای داخلی دستگاه در زمان کار کردن نرمال است                                                                                     |

## نکته‌هایی برای نگهداری

### یادداشت:

- ۱- این دستگاه ضد آب است. می‌توانید برای تمیز کردن آن از آب و مایع شوینده استفاده کنید. (دستگاه را به مدت طولانی در آب فرو نکنید.)
- ۲- لطفاً برای تمیز کردن دستگاه از پارچه مرطوب یا مواد شوینده خنثی استفاده کنید و سپس آن را خشک نمایید.
- ۳- برای پاک کردن از برس سخت یا ابزار تیز، بنزین و سایر مواد آلی استفاده نکنید.

### نگهداری:

- ۱- لطفاً دستگاه را در جعبه و در مکان امن، خشک و خنک نگهداری کنید.
- ۲- دستگاه را در مکانی با درجه حرارت بالا، نزدیک آتش و یا در معرض نور مستقیم خورشید، و یا در هر شرایطی که موجب آسیب آن می‌شود، قرار ندهید.
- ۳- دستگاه را در تماس با بنزن، رقیق‌کننده‌ها یا هر مایع حلال و خورنده دیگر قرار ندهید.